

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Ирригатор — это прибор для ухода за полостью рта. Используется для удаления зубного налёта, остатков пищи из межзубных промежутков и массажа дёсен за счёт пульсаций водяной струи.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.
- Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному в данной инструкции и на изделии.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией. Прибор не предназначен для промышленного или медицинского применения.
- Не подвергайте прибор воздействию высоких температур и не кладите её в непосредственной близости от оборудования, выделяющего избыточное тепло (солнечного света, обогревателей, микроволновых печей, духовок или водонагревателей). Перегрев батареи прибора может вызвать её взрыв.
- Во избежание поражения электрическим током, не опускайте прибор и USB кабель в воду или иные жидкости.
- Следите, чтобы USB кабель не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не оставляйте включенный или заряжаемый прибор без присмотра.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждение USB кабеля. Внимание! Чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Не держите и не перемещайте прибор за USB кабель.
- Не нарушайте целостность прибора, нарушение целостности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.


- Во избежание получения травм используйте только те аксессуары, которые идут в комплекте поставки.
- Заряжайте прибор только с помощью USB кабеля, предоставленного изготовителем.
- Продолжительное использование прибора может привести к его перегреву и поломке. Перед повторным включением дайте прибору остыть в течение 10 минут.
- Не включайте прибор без насадки.
- Выполняйте все требования инструкции.
- Изготовитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.
- Изготовитель не несет ответственности за нанесения травм в случае несоблюдения мер предосторожности.

ВНИМАНИЕ!

При наличии заболеваний таких как: гингивит, пародонтит, стоматит, пульпит, травматические поражения десен, наличие глубоких кариозных полостей и клиновидных дефектов поздних стадий, истончение эмали пользоваться прибором запрещено!

- Перед применением рекомендуется проконсультироваться со стоматологом и использовать прибор только с разрешения врача.
- Используйте только для полости рта.
- Во избежание травмы, не направляйте струю воды в глаза, нос, уши или горло.
- Во время использования не рекомендуется сильно принимать насадку прибора к зубам или деснам — это может вызвать их повреждение.
- Не наливайте в резервуар воду, температура которой превышает 40 °С.
- Не заливайте в резервуар никаких жидкостей, кроме питьевой воды либо жидкостей, предназначенных специально для ирригаторов.
- В целях предотвращения нанесения вреда здоровью вследствие развития плесени и бактерий, держите прибор в чистоте, соблюдайте санитарно-гигиенических нормы.
- После использования прибора выливайте остатки воды из емкости для воды и включайте прибор на 2–3 секунды для его полного осушения.
- В целях безопасности, при использовании устройства следует избегать продолжительного воздействия на десны. Начинайте использование ирригатора с минимального напора струи с постепенным его увеличением.
- Выбирайте подходящую насадку в соответствии с целями использования.
- В случае возникновения любых неприятных ощущений, боли или дискомфорта, вызванных использованием прибора, рекомендуется немедленно прекратить его эксплуатацию.

ОПИСАНИЕ

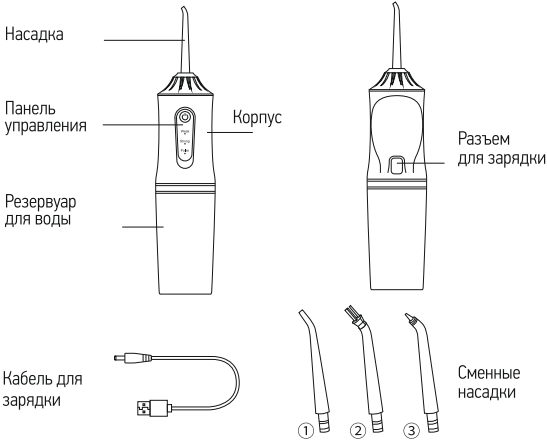

Панель управления



Съемные насадки

1. Стандартная насадка необходима для комплексного очищения полости рта и массажа десен. Она представляет собой трубку с твердым изогнутым наконечником без щетинок. Стандартная насадка хорошо удаляет налёт и укрепляет десны. Подходит для ежедневной гигиены.
2. Ортодонтическая насадка бережно очищает края десен, участки между плотно

работает от аккумулятора, заряжаемого от сети переменного тока.

Технические характеристики

Аккумулятор: Li-Ion, 18650 3.7 В 800 мАч
Вход АС: 5 В - 1 А
Выход DC: 3.7 В
Мощность 5 Вт
Давление струи: 40-80 PSI
Частота пульсации: 700-1500 пульсаций в минуту
Объем резервуара: 200 мл
Время работы от батареи: 1 час
USB кабель
Состав (материал): пластмасса, металл, силикон.
Гарантия 1 год. Срок службы 3 года.
Дата изготовления указана на упаковке товара.

Назначение прибора: прибор предназначен для удаления зубного налета, остатков

данном виде транспорта. При

- Хранение и транспортировка
- Электроды и проволочные электроды
- Электроды и проволочные электроды

- После окончания прибора и все насадки асучо.
- Не погружайте прибор в воду и иные жидкости.

расположенными зубами, детали несъемных конструкций, брекет-системы.

3. Пародонтологическая насадка имеет мягкий наконечник, который не травмирует чувствительные десны. Помогает в очищении десневого края и десневых карманов.

Смена насадок

- Прежде чем приступить к установке/замене насадок, убедитесь в том, что прибор отключен от электросети или другого источника питания.
- Выберите одну из 3 насадок.
- Установите насадку, аккуратно вставив в гнездо для установки насадок до упора.
- Для замены насадки захватите насадку пальцами и потяните ее с усилием, чтобы извлечь из прибора.
- Установите другую насадку.

Работа

Включение/Выбор уровня интенсивности/Выключение

Перед первым использованием зарядите аккумулятор в течение 3-4 часов с помощью входящего в комплект USB кабеля. Во время зарядки синие LED-индикаторы попеременно загораются. Ирригатор считается полностью заряженным, когда все 3 синих LED-индикатора горят непрерывно. После завершения процесса зарядки, отсоедините кабель питания.

Примечание! Прибор не включается в процессе зарядки.

Важно! Использовать только в вертикальном положении.

- Перед началом использования снимите резервуар для воды и наполните его чистой, умеренно теплой питьевой, закрепите резервуар на корпусе ирригатора.
- В зависимости от цели использования, выберите соответствующую насадку и установите в гнездо для установки насадок.

- Коротким нажатием кнопки устройства  включите прибор. Выбор режима работы (щадящий/ стандартный/ импульсный) осуществляется последовательными нажатиями на кнопку  в течение 2 секунд.

Внимание! Не включайте ирригатор без воды — это может привести к поломке насоса.

- Передвижной прибор отключается от источника питания.
- Хранение прибора в его аксессуарах в состоянии готовности его.
- Корпус прибора протирают мягкой влажной салфеткой, затем вытирают насухо. Не

Чистка

- [illegible]

Важно! Ирригатор не заменяет чистку зубов щеткой и пастой, а только дополняет ее.

Рекомендации по использованию

- Аккуратное обрабатывание ротовую полость, не прикладывая силу и не давите.
- После того как сеан закончен, коротко нажмите , прибор выключится.
- Произведите чистку прибора (см. раздел Чистка).

Иппитатор EN-701S



Истражување по експертаци

ENERGY

[illegible]

«Тор-Импорт», Адрес: 197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, дом № 10, лит. 3.

правления или организации в вашем регионе.

В целях улучшения качества предоставления информации, и/или иной специфической информации могут быть изменены:

через представительство или иного уполномоченного лица.

По окончании срока службы прибор и упаковочные материалы должны быть